

PROVTAGNINGSPROCEDUR

Vildsvin – Provtagning av Trikiner och Cesium-137

Denna provtagningsinstruktion gäller provtagning av vildsvin inför analys av Trikiner och Cesium-137.


PROVMATERIAL

Vi skickar dig ett förregistrerat provmaterial med dina uppgifter. Använd ett kuvert per vildsvin.

I provmaterialet ingår:

- Dubbla påsar/analys (mindre i större)
- Etikett på den större påsen (följesedel)
- Svarspostetikett (på svarskuvertet)
- Vadderat svarskuvert (för inskick av prov)

FÖLJESEDEL ->

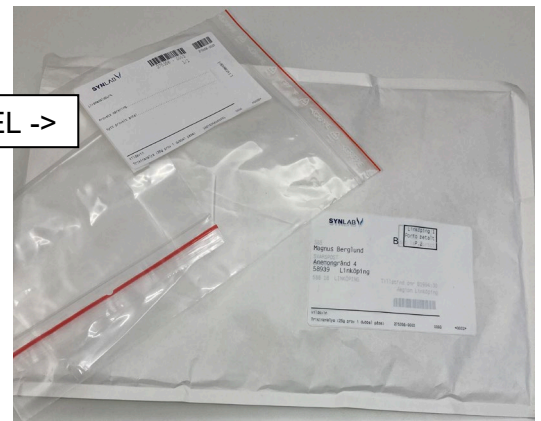

PROVUTTAG

- Frambenets stora muskel (läggen mellan knä och bog) eller,
- Mellangärdet (diafragmafästet utmed ryggraden) eller,
- Tungan

Observera att muskeln ska vara fri från bindväv och fett.

Trikin minst 25 gram prov

Cesium-137 minst 150 gram prov.